



Ortopedik Soft ve Rigid Destekler





Lumbamed® basic

Clima-comfort örme,
lumbar destek

bayan cm	bay cm
1 : 66-76	1 : 76-86
2 : 76-88	2 : 86-98
3 : 88-101	3 : 98-111
4 : 101-115	4 : 111-125
5 : 115-130	5 : 125-140
6 : 130-146	6 : 140-156

Endikasyonlar:

- Faset eklem rahatsızlıklarından kaynaklanan bel ağrısı (lumbago)
- Lumbar omurgada postüral kas dengelessizliği
- Ligamentöz rahatsızlıklar
- Postdisektomi sendromu
- Osteokondrozis ve spondilozis gibi lumbar omurgada hafif eklem gevşekliliği
- Sakroiliyak eklem iritatif durumlarında

Etki Şekli:

- Lordoz ve pelvik anterotasyonu hafifçe azaltır
- Lumbar omurgada fark edici bir rahatlama sağlar ve sırt kaslarını destekler
- Lumbosakral bölge anatomisine mükemmel adaptasyon için 4 adet entegre edilmiş ve

anatomik olarak 35 derece açıyla şekillendirilmiş, elle ayarlanabilir dorsal balenler

- Destek stimüle metabolizmasıyla güçlendirilen proprioseptif kompresyon etkisi musküler gerginliği ve ağrıyı azaltır

Özellikler:

- Nefes alan ve nem tutmaz
- Clima Comfort örme kullanımda kalıcı konfor sağlar
- Comfort-zone: anatomik şekilli ön kapama sistemi sayesinde baskıya yol açmadan ürünün vücuda mükemmel uyumunu sağlar.
- Erkek ve kadın versiyonları bulunmaktadır
- El bantları sayesinde kolay giyilebilir



Lumbamed® plus

Clima-comfort örme, Vario-flex masaj pedli lumbosakral bel korsesi

bayan cm	bay cm
1 : 66-76	1 : 76-86
2 : 76-88	2 : 86-98
3 : 88-101	3 : 98-111
4 : 101-115	4 : 111-125
5 : 115-130	5 : 125-140
6 : 130-146	6 : 140-156

Endikasyonlar:

- Küçük intervertebral eklemlerin bozukluklarına bağlı bel ağrısı
- Lomber bölgede postüral ilişkili veya musküler dengelessizlikler
- Ligamentöz bozukluklar
- Distektomi sonrası problemler
- Osteokondrozis ve spondilozis gibi durumlara bağlı lomber omurgada hafif eklem gevşekliliği
- Sakroiliyak eklem iritasyonu
- Simfiziolizis

Etki şekli:

- Lordozu ve pelvik anterotasyonu hafifçe azaltır
- Vario-Flex ped sakroiliyak eklemi stabilize eder ve lumbosakral birleşimi rahatlatır
- Lomber kasların masajı yoluyla dolaşımı artırır
- Vario-Flex ped takıldığı zaman, sakroiliyak eklemi ve

lumbosakral birleşimi stabilize eder. Bu durum, kompresif örgünün de yardımıyla kas gerginliği ve ağrısını azaltır.

Özellikler:

- Hava geçiren ve nem uzaklaştıran özelliğe sahip clima-comfort kumaş uzun süreli sabit ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vario-Flex delikli yapısı sayesinde sıcaklık artışı ve terlemeyi önleyerek bu etkiyi güçlendirir.
- Comfort-zone: anatomik şekilli ön kapama sistemi sayesinde baskıya yol açmadan ürünün vücuda mükemmel uyumunu sağlar.
- Korseinin sağ ve sol yanlarında bulunan el geçirme bantları sayesinde kolay uygulanabilir.
- Bay ve bayan farklı modeller vardır.



Lumbamed® disc

Clima-comfort örme, ayarlanabilir stabilizasyon sistemli lumbosakral bel korsesi

bayan cm	bay cm
1 : 66-76	1 : 76-86
2 : 76-88	2 : 86-98
3 : 88-101	3 : 98-111
4 : 101-115	4 : 111-125
5 : 115-130	5 : 125-140
6 : 130-146	6 : 140-156

Endikasyonlar:

- Lomber omurga ve torakolomber eklemin musküler instabilitesi
- Disk protrüzyonu ve disk kaymasına bağlı lumbago
- Disk cerrahisi sonrası post-operatif tedavi
- Lomber stres sendromları
- Aktif spondilartroza bağlı psödo radiküler ağrı
- Lumbago
- Spondilartrozis
- Osteokondrozis

Etki şekli:

- Kas tonusunu azaltarak etkinleşmiş spinal segmentlerdeki basıyı hafifletir
- Köprü balen sayesinde lomber lordozu düzleştirir
- Abdominal kasları aktive eder ve abdominal bölgeyi destekler

- Pelvik anterior rotasyonu azaltır
- Modüler dizaynı sayesinde (sırt pedi ve iki farklı sertlik derecesine sahip, değiştirilebilir stabilizasyon balenleri ile) iyileşme sürecindeki ilerlemeye göre desteğin stabilitesi ayarlanabilir / azaltılabilir.

Özellikler:

- Hava geçiren ve nem uzaklaştıran özelliğe sahip clima-comfort kumaş uzun süreli sabit ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Comfort-zone: anatomik şekilli ön kapama sistemi sayesinde baskıya yol açmadan ürünün vücuda mükemmel uyumunu sağlar.
- Korseinin sağ ve sol yanlarında bulunan el geçirme bantları sayesinde kolay uygulanabilir.
- Bay ve bayan farklı modeller vardır.



Lumbamed® facet

Clima-comfort örme, ayarlanabilir stabilizasyon sistemli lumbosakral bel korsesi

bayan cm	bay cm
1 : 66-76	1 : 76-86
2 : 76-88	2 : 86-98
3 : 88-101	3 : 98-111
4 : 101-115	4 : 111-125
5 : 115-130	5 : 125-140
6 : 130-146	6 : 140-156

Endikasyonlar:

- Faset eklem osteoartriti
- İntervertebral disk protrüzyonu/prolapsı
- Lomber bölgede ağrılar/iskiyali
- Lumbago
- İliyosakral eklem tutulması ile lumbago
- Lumbosakral bölgede kronik ağrılar
- Vertebral kaymanın görülmediği spondiloz
- Kasların çalışmasında dengelessizlik
- Spondilolistez
- Segmental instabilite
- Lomber vertebral kanal stenozu

Etki Şekli:

- Lordozun etkili şekilde azaltılması ile faset eklemden hedeflenen rahatlama.


- Çift 3 noktalı bant sistemi sayesinde karın içi basıncın hassas şekilde ayarlanması
- Pelvisin dik bir pozisyonda tutulması
- Lumbar omurga bölgesinde stabilizasyon ve lumbosakral geçiş

Özellikler:

- Çift 3 noktalı bant sistemi
- Karın çevresindeki dairesel basıncın bireysel ve devamlı şekilde artışını sağlar.
- Comfort-zone: anatomik şekilli ön kapama sistemi sayesinde baskıya yol açmadan ürünün vücuda mükemmel uyumunu sağlar.
- Örme kumaş ve bantlar (özellikle alt bantlar) tam olarak pelvis ve iliyoosakral eklem içine gelecek şekilde (özellikle iliyoosakral eklem şikâyetlerinde) pozisyonlandırılmıştır.

**medi 3C®**

Ratchet kilitli 3-nokta
hiperekstansiyon korsesi

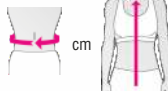		cm
27 cm I	55-90	45-53
27 cm II	91-125	45-53
20 cm I	55-90	37-45
20 cm II	91-125	37-45

Endikasyonlar:

- Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
- Scheuermann hastalığındaki hiperkifozis
- Lomber ve torasik omurgada operasyona uygun olmayan vertebra kırıklarının konservatif tedavisi
- Geçici post-operatif bakım

Etki şekli:

- Omurganın ekstansiyonu (torakolomber bileşke)

Özellikleri:

- Yeni patentli Ratchet kilit: basit ve güvenli kullanım
- Yeni Ratchet kilit sayesinde kolayca korseyi kapatabilme
- Ayarlanabilir sternal ped vücut hareketlerine dinamik adaptasyon sağlar
- Hafif malzeme ve bası bölgelerindeki pedler ile kolay kullanım

**medi 4C®**

Ratchet kilitli
hiperekstansiyon korsesi

		cm
sırt pedi 22 cm	-125	
sırt pedi 28 cm	-125	

Endikasyonlar:

- Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
- İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyon
- Torasik ve lomber omurganın osteoporotik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon
- Stabil olmayan vertebral gövde kırıklarının açık cerrahisi sonrasında geçici ortotik bakım
- Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazlarında sürekli ortotik bakım
- Vertebral gövdelerin tümör ve metastazlarının cerrahisi sonrasında post-operatif bakım
- İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım

Etki şekli:

- Vertebral kolonun hiperekstansiyonu sagittal düzlemde stabilizasyon sağlar
- Subklavikular ekstansiyon pedleriyle rotasyonel stabilite sınırlanır
- Stabil yapı iskeleti lateral fleksiyonu kısıtlar

Özellikleri:

- Üç boyutta sınırsız ayarlama ile vücuda mükemmel uyum
- Yeni patentli Ratchet kilit: basit ve güvenli kullanım
- Yeni Ratchet kilit sayesinde kolayca korseyi kapatabilme
- Akut ve post-operatif vakalarda hızlı uygulama
- Hafif malzeme ve bası bölgelerindeki pedler ile kolay kullanım
- Ratchet kilidin önde yer alması kapatma sırasında rotasyonel hareketleri önler

**medi 4C® flex**

B-fast kilitli
hiperekstansiyon korsesi

		cm
S	60-75	39-47
M	76-90	42-50
L	91-105	45-53
XL	106-115	48-56

Endikasyonlar:

- Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
- İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu
- Torasik ve lomber omurganın osteoporotik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon
- Stabil olmayan vertebral gövde kırıklarının açık cerrahisi sonrasında geçici ortotik bakım
- Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazlarında sürekli ortotik bakım
- Vertebral gövdelerin tümör ve metastazlarının cerrahisi sonrasında post-operatif bakım
- İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım

Etki şekli:


- Vertebral kolonun hiperekstansiyonu sagittal düzlemde stabilizasyon sağlar
- Subklavikular ekstansiyon pedleriyle rotasyonel stabilite sınırlanır
- İskeletin stabilizasyonunu sağlayarak lateral fleksiyonu kısıtlar

Özellikleri:

- Oturma sırasında daha fazla konfor sağlayan hareketli kalça barı
- Yan bar uzunlukları opsiyonel olarak ayarlanabilen 4 beden
- Yeni geliştirilmiş B-fast kilit ile kolay kullanım
- Göğüs barlarının genişliği ayarlanabilir

**Spinomed®**

Osteoporozda
vertebral ekstansiyon için
sırt korsesi

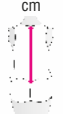cm		
XS	-43	
S	44-49	
M	50-55	
L	56-61	

Etki şekli:

- Destek, sırt kaslarını aktive ederek osteoporotik kifozu azaltmak üzere dorsal omurgayı düzeltir
- Vücudun kendi kas kuvvetinin stimüle edilmesini sağlar
- Optimal biçimde uygulandığında hastanın ağrısını hafifletir ve mobiliteyi artırır

**Özellikleri:**

- Kolayca şekillendirilebilen sırt desteği ile her hastaya hastaya göre ayarlanabilir.
- Korse çok hafiftir ve giysi altından rahatlıkla kullanılır.
- Torasik veya abdominal solunumu engellemez
- Omuz ve kol hareketlerini kısıtlamaz.

**Endikasyonlar:**

- Torasik ve lomber omurgada osteoporotik kemik kollapsı
- Juvenil Scheuermann hastalığı
- Kronik sırt ağrılı hiperkifozis



medi SLK® 90

5°abduksiyon ve 0° derece
eksternal rotasyon desteği



sol / sağ

S : -34
M : 35-39
L : 39+

Endikasyonlar:

- Posterior omuz stabilizasyonu ya da çok yönlü instabilite sonrası post-operatif immobilizasyon
- Travmatik posterior omuz dislokasyonu sonrası konservatif bakım
- Anterior kapsül dönmelerinde veya anterior ve posterior omuz instabilitelerinde immobilizasyon
- Tuberculum majus yırtılmalarında konservatif bakım
- Latissimus dorsi transferi

Etki şekli:

- Posterior kapsülün optimum pozisyonda tutacak şekilde omuzun 90° frontal düzlemde pozisyonlanmasını sağlamak

Özellikleri:

- Anatomik şekle sahip yastıklı güvenli pozisyonlama sağlar
- Bant sistemleri sayesinde kayma engellenir
- El, el bileği ve dirseğin post-operatif pasif ve aktif mobilizasyonu sağlar



medi SAK®

10°- 60° aralığında
ayarlanabilir abduksiyon
desteği

tek beden

Endikasyonlar:

- İmpingement sendromu (akut ve kronik enflamasyonda açık veya artroskopik) Dekompresyon
- Akromiyoplasti sonrası
- Rotator cuff rüptürleri sonrası rekonstrüksiyon
- Omuz protezi implantasyonu
- Anestezi sonrası donuk omuz

Etki şekli:

- Omuz ekleminin 10°- 60° abduksiyon dereceleri arasında immobilizasyonu
- Subakromiyal alanda basıncın geçici olarak azalması
- Yatay düzlemde omuz ekleminin opsiyonel ağırlıksız mobilizasyonu

- Subakromiyal, subkorakoid ve subdeltoid bölgelerde adezyonları engellemek için mobilizasyon
- Üst kol pedi ek omuz eklemi güvenliği sağlar


Özellikleri:

- Düşük ağırlık ve havlu kumaşlı pedlere bağlı konforlu kullanım
- Güvenle takılıp çıkartılabilen hasta dostu ön kol ve üst kol bantları
- Rahat 'tenis topu' el dayanağı, ön kol kaslarını çalıştırabilme imkanı



medi Epico ROM® s

PRU eklem immobilizasyonu ile
mobilizasyon için dirsek ortezi

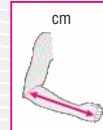

sol / sağ

S : -29
L : 29-42

Endikasyonlar:

- Dirsek luksasyonu / dislokasyonu konservatif tedavisi
- Ek yaralanmalarla birlikte dirsek luksasyonu / dislokasyonu konservatif tedavisi
- Medial veya lateral epikondil kırıklarının ortotik tedavisi
- Protez implantasyonu sonrası post-operatif tedavi
- Distal humerusun stabil kırıkları sonrası fonksiyonel bakım
- Dirsek artrolizi sonrası geçici immobilizasyon

Etki şekli:

- Çeşitli açılarında dirseğin immobilizasyonu

- 10°'lik basamaklarla opsiyonel olarak ayarlanabilen hareket açıklığında dirseğin immobilizasyonu
- 0°-120° aralığında fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri


Özellikleri:

- Flat QuickSet eklem sayesinde, kıyafetlerin altında dahi rahat kullanım
- Bir tuşa basarak kolaylıkla eklem ayarlama özelliği
- Kolayca şekillendirilebilen ve böylece her kola adapte olabilen alüminyum çerçeve
- Cilt dostu, hastanın ihtiyaçlarına göre kesilebilen ve çıkartılabilen rahat el dayanağı
- Kişiyeye göre ayarlanabilen, pedli boyun askısı



medi humeral fracture brace

Omuz kırığı desteği

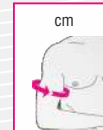

sol / sağ

S : 21-28
M : 26-34
L : 31-40

Etki şekli:

- Metal çubuklar sayesinde kırığı stabilize eder
- Hafif kompresyon uygular
- Kolay uygulanır ve erken rehabilitasyona izin verir

Özellikleri:

- Özel uyum ve x-ray için portatif sert barlar
- Tamamen ayarlanabilir üst kol bantları
- Kolu kaldırmak veya konumlandırmak için esnek uygulama aralığı ve kompresyonu
- Düşük profilili hastanın gysilerine zarar vermeyen kaplama



Endikasyonlar:

- Omuzdaki subkapital veya şaft kırıklarının post-operatif korunumu
- Omuz kırıkları için konservatif tedavi

**Omomed®**

Hareket sınırlayıcı fonksiyonel omuz desteği



cm	sol / sağ
0	: -26
I	: 26-29
II	: 29-33
III	: 33-36
IV	: 36-39

Endikasyonlar:

- Proksimal humerus başı, glenoid kavite ve skapula kinklarının konservatif ve postoperatif tedavisi
- Omzun ağırlı osteoartritinin konservatif tedavisi
- Omuz eklemi protezi sonrası postoperatif tedavi
- Omzun akut ve kronik anterior dislokasyonunun konservatif tedavisi
- Omuz eklemi stabilizasyonu sonrası post-operatif tedavi
- Rotator cuff insersiyonunun rekonstrüksiyonu ve SLAP lezyonunda biceps tendonu uzun başının refleksyonu

Etki şekli:

- Elastik dokuma yüzeyel yumuşak dokulara hafif kompresyon uygulayarak şişliği engeller ve geriletir, kas gevşliğini azaltır

- Omuz ekleminin eksternal rotasyon,abduksiyon ve antifleksiyon hareketini gerektirdiği kadar sınırlayan ürün yaralanmalara sebep olacak hareketleri engeller ve sınırlandırır
- Omzu çevreleyen kasların tonusunun azalması humerus başının glenoid kaviteye daha iyi oturmasını sağlayarak postural problemleri düzeltir ve omuz ağrısını hafifletir

Özellikleri:

- Esnek bant sistemi omuz eklemindeki hareketin kişiye göre ayarlanabilen değişik miktarlarda limitasyonuna izin verir
- Esnekliği yüksek, aktif hava geçiren ve nem uzaklaştıran özelliğe sahip olan clima-comfort kumaş üst kol ve omuz çevresini anatomik olarak çevreleyecek tarzda örülmüştür

**medi Epicomed®**

Silikon pedli ve germe bantlı örme dirseklik

I	: 17-20
II	: 20-23
III	: 23-26
IV	: 26-29
V	: 29-32
VI	: 32-35

Endikasyonlar:

- Lateral ve medial epikondilit (tenisçi dirseği, golfçü dirseği)
- Dirsek dislokasyonu
- Artrit ve osteoartrite bağlı eklem efüzyonu ve şişliği
- Kronik postoperatif ve posttravmatik enflamasyon

Etki şekli:

- Kompresif olarak dokunmuş kumaş ve silikon ped iyileşme sürecini hızlandıran masaj etkisi sağlar
- Ağrıyı azaltan ve tendon yapışma yerlerindeki gerilimi azaltan özel basınç bölgeleri

Özellikleri:

- Silikon pedler eklenmiş, anatomik yapıya göre örmeye sahip destek
- Basınç düzeyini kişiye göre ayarlama olanağı sunan çıkarılıp takılabilen ekstra stabilizasyon bandı
- Dirsek bükülme yerinde özel dokunmuş **comfort-zone** ciltteki sıkıştırma ve baskı hissini azaltır
- Yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen, nem uzaklaştıran **clima-comfort** dokuma.

**medi elastic elbow support**

Örme dirseklik

II	: 20-23
III	: 23-26
IV	: 26-29
V	: 29-32
VI	: 32-35

Endikasyonlar:

- Ödem ve eklem efüzyonları
- Romatizmal ve osteoartritlik iritasyonlar

Etki şekli:

- Hareket esnasında kompresyon ve masaj uygulayarak dirsek yumuşak dokularına kan akışını hızlandırır ve irite olmuş ekleme rahatlatma sağlar.

Özellikleri:

- Yüksek elastikiyet, anatomik şekil, iki yöne esneyebilen örme dokuma desteği
- Kompresyon etkisi ile ödem ve efüzyonların giderilmesi sağlanır
- Ödemin giderilmesi ile birlikte, dirsek bölgesinde rahatlatma

**medi Epibrace®**

Epikondilit ortezi

tek beden

Endikasyonlar:

- Epikondilit (Tenisçi / golfçü dirseği)

Etki şekli:

- Ped ön kol kasının üzerine basınç yapar. Bu basınç dirsek tendon ve kaslarındaki yükü azaltır.

Özellikleri:

- Havalı baskı pedi dirsek bölgesinde aynı basıncın uygulandığını garanti eder, harekete bağlı olarak basınç artmasını engeller.
- Havalı baskı pedi hareketlidir. Böylelikle medial ya da lateral bölgelerde kolaylıkla uygulanır.
- 10 kademe ayar çizgileri sayesinde hastaların doğru baskı derecelerini belirlemeleri sağlanır.
- Elastik bant sayesinde hastaya mükemmel uyum
- Cilt dostu, hava geçiren Airtex materyal



Rhizomed® soft

Başparmak immobilizasyon splinti

cm	sol / sağ
	I : 13-17 II : 18-23

Endikasyonlar:

- Başparmak distal falangial eklemin lateral ligamentlerinde yaralanmalar (kayakçı başparmağı)
- Başparmak ekleminin ve başparmak distal falangial ekleminin irritasyonu (Rhizoartrozis)
- Burkulma

Etki şekli:

- Başparmağın immobilizasyonu

Özellikleri:

- Kolayca şekil verilebilen alüminyum çerçeve
- Terlemeyi önleyen açık çerçeve
- Slip-on sistem ve tutma kemerleri sayesinde kolay kullanım



Rhizomed®

Başparmak eklemi ortopedik desteği

cm	sol / sağ
	XS : -8 S : 8-10 M : 10-12 L : 12+

Endikasyonlar:

- Karpometakarpal artritler
- Bağ zedelenmeleri
- Başparmak ekleminde inflamasyonlar

Etki şekli:

- Metakarpal falanks ve karpometakarpal başparmak ekleminin etkili stabilizasyonu
- Entegre stabilizasyon, güvenli immobilizasyon sağlar
- Tüm el tipleri için 2 adet ayarlanabilir başparmak bandı stabiliteyi artırır.
- Yarı-açık şekli ile başparmaktaki çeşitli derecelerdeki şişliklere uyum sağlar.
- Başparmağın tutma ve kavrama kabiliyeti korunur.

Özellikleri:

- Yüksek giyim konforu: atelin yarı-açık şekli, elastik ve nefes alabilen dokuması ile yüksek giyim konforu sağlar; çeşitli aşamalarındaki şişliklere de uyum sağlar
- Artan Stabilite: kolaylıkla ayarlanabilen velcro bantlar sayesinde ekstra stabilite sağlar
- Kolay kullanım: geniş açıklığı ile uygulama ve çıkarma esnasında mümkün olan en az acı hissi
- Güvenilir immobilizasyon: entegre stabilizasyon zedelenmiş alanda en güvenli immobilizasyonu sağlar.



medi thumb support

Başparmak desteği

cm	sol / sağ
	S : 10-14 M : 14-18 L : 18-22 XL : 22-26

Endikasyonlar:

- Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklem yaralanmaları
- Başparmağın ligamentöz laksitesi
- Başparmağın karpometakarpal ekleminin artrozu
- Romatoid artrit

Etki şekli:

- Başparmağın immobilizasyonu

Özellikleri:

- Cilt dostu ve dayanıklı pamuklu-lirka materyal
- Şekil verilebilen alüminyum splint



Manumed® active

Clima-comfort örme, statik el bileği splinti

cm	sol / sağ
	I : 13-15 II : 15-17 III : 17-19 IV : 19-21

Endikasyonlar:

- Bilek zorlanmaları
- Bilekte osteoartrit
- İnstabilite
- Tenosinovit
- Post-travmatik, post-operatif ve romatizmal durumlar

Etki şekli:

- Volar splint bileği stabilize eder ve bilekteki yorgunluğu azaltır
- Kompresif dokuma ve volar bilek splinti sayesinde bileğin istirahate alınması sağlanır
- Anatomik şekilli destek bandı ulnar bölgeye tam uyum sağlar

Özellikleri:

- Optimal ölçülerdeki volar bilek desteği geniş bileklerde bile tam destek sağlar
- Bilek splinti anatomik olarak şekillendirilmiştir ve istenirse kolayca bileğe göre yeniden şekillendirilebilir
- Anatomik şekle sahip destek bandı ile tam uyum
- Clima-comfort dokuma sayesinde hava geçiren ve nemi vücuttan uzaklaştıran sistem
- Elastik ve kompresif dokuma sadece 4 beden ile her hastaya mükemmel uyum sağlar

**Manumed®**

Statik el bileği splint

cm	sol / sağ
0	: -14
I	: 14-18
II	: 19-23
III	: 24-28

Endikasyonlar:

- El bileğinin kronik postoperatif veya posttravmatik yumuşak doku yaralanmaları
- Radial sinir paralizi
- Burkulmalar sonrası immobilizasyon
- Tendinit ve/veya tenosinovitlerin konservatif tedavisi
- Romatoid artrit

Etki şekli:

- Şekillendirilebilen alüminyum splint sayesinde el bileğinin immobilizasyonu ve stabilizasyonu

Özellikleri:

- Elastik olmayan, hava geçirgen, nem uzaklaştırıcı dokuma
- El bileği için ayarlanabilir ekstra destek bandı
- Anatomik yapıda, kişiye göre şekil verilebilen alüminyum splint
- Kaydırarak kolayca giyilmeyi sağlayan 'slip-on' sistem
- Ayarlanabilen velcro bantlar
- Cilt dostu, hava geçiren Airtex materyal

**Manumed® T**

Başparmak destekli statik el bileği splint

cm	sol / sağ
0	: -14
I	: 14-18
II	: 19-23
III	: 24-28

Endikasyonlar:

- El bileği ve/veya başparmağının burkulmaları
- Bilek ve başparmağın post-operatif fiksasyonu
- Başparmak ekleminde ulnar kollateral ligament lezyonları
- Bilek ve başparmakta tendinit ve tendinopati
- Romatizmal hastalıklarda enflamasyon

Etki şekli:

- Başparmak eklemlerinin ve bileğin fiksasyonu ve stabilizasyonu

Özellikleri:

- Elastik olmayan, hava geçirgen, nem uzaklaştırıcı dokuma
- El bileği için ayarlanabilir ekstra destek bandı
- Anatomik yapıda, kişiye göre şekil verilebilen alüminyum splint
- Kaydırarak kolayca giyilmeyi sağlayan 'slip-on' sistem
- Ayarlanabilen velcro bantlar
- Cilt dostu, hava geçiren Airtex materyal
- Özel başparmak desteği

**Manumed® Tri**

Pronasyon ve supinasyon hareketlerini kısıtlayan el bileği ortezi

cm	sol / sağ
I	: -14
II	: 19-23

Endikasyonlar:

- KTS cerrahisi sonrasında konservatif tedavi
- Radio-ulnar eklem artrozu
- Radial kırıklar sonrası fonksiyonel terapi
- Tendovajinitis
- Loge de Guyon sendromu
- El bileği kırıkları
- Disk dikişi sonrası

Etki şekli:

- El bileğinin 6 hareket düzeyinde immobilizasyonu
- Pronasyon ve supinasyon (ön kolun eksenini etrafında dönme) hareketlerinin kısıtlanması
- Radio-ulnar eklem hareket aralığının limitasyonu

Özellikleri:

- Alüminyum çerçeve sayesinde basit bir şekilde hastanın eline uygulanabilme
- Volar dokuma ve başparmak etrafında comfort zone sayesinde kolay giyim
- Yenilikçi çerçeve sayesinde günlük aktivitelerde daha çok hareket ve daha rahat kullanım

**medi CTS**

KTS için el bileği splint

cm	XS : -15
	S : 15-17
	M : 17-19
	L : 19-22

Endikasyonlar:

- Karpal Tünel Sendromu (KTS) konservatif tedavisi ve cerrahi sonrası
- El bileği ve parmakların immobilizasyonu

Etki şekli:

- El bileği ve parmakların immobilizasyonu ile ağrı, şişlik ve enflamasyonun azaltılması

Özellikleri:

- Açık ve çok hafif tasarımı sayesinde çok kolay kullanımı
- medi CTS ön kolda el bileği yakınlarından distal parmak eklemlerine kadar uzanır
- Avuç içi splint anatomik olarak hazırlanmıştır ve kişiye göre ayarlanabilir
- Elin nötral pozisyonunda güvenli ve geçerli immobilizasyonu



medi hip orthosis

Hareket açıklığına sahip fonksiyonel kalça ROM ortezi

cm	sol / sağ		
	A	B	C
S	70-80	38-46	35-40
M	81-100	47-56	41-47
L	101-115	57-66	48-54
XL	116-135	67-76	55-62

Endikasyonlar:

- Primer total kalça replasmanı sonrası post-operatif stabilizasyon
- Kalça revizyon cerrahisi sonrası post-operatif stabilizasyon
- Femur başı rezeksiyonu sonrası
- Korreksiyon osteotomisi sonrası

Etki şekli:

- Dislokasyon/luksasyona karşı koruma
- Kontrollü erken fonksiyonel egzersiz tedavisi
- 10°'lik basamaklarla 120°'ye kadar ayarlanabilen ekstansiyon ve fleksiyon limitasyonu

Özellikleri:

- İstenilen şekilde ayarlanabilen abduksiyon ve adduksiyon açısı
- Güvenli şekilde bağlanma, medial femoral kondilde vücut ağırlığının taşınması. Uygun biçim verilmiş pelvik ve uyluk yapısal destekleri sayesinde efektif kuvvet transmisyonu
- Ayarlanabilir çevre ve yüksekliğin sağladığı optimal anatomik uyum
- Konforlu havlu kumaşlı pedler
- Hızlı ve kolay takma-çıkarma



medi orthocox

Prof. Dr. Echtermeyer tarafından tasarlanan kompresyonlu kalça rotasyon desteği

cm	sol / sağ	
	A	B
S	70-90	50-60
M	85-105	55-70
L	100-120	65-80
XL	115-140	75-90
XXL	130-160	85-100

Endikasyonlar:

- İntertrokanterik repozisyon osteotomisi
- Trokanterik kırıkların internal fiksasyonu
- Total kalça replasmanı

Etki şekli:

- Serbestçe ayarlanabilen kalça rotasyonu
- Kalça bölgesinde optimum kompresyon
- Kıyafet değiştirme sonrasında tekrar kullanılabilme
- Hasta mobilizasyonuna yardımcı

Özellikleri:

- Basit, zaman almayan uygulama
- Yüksek geçirgenliğe sahip dokuma ve cilt dostu hipoalerjenik materyal sayesinde kolay kullanım



medi ROM®

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu ve immobilizasyon seçeneekli diz ortezi

ortez uzunluğu (cm)	short (kısa) : 57 long (uzun) : 63
---------------------	---------------------------------------

Endikasyonlar:

- Post-operatif immobilizasyon
- Diz yaralanmaları sonrası stabilizasyon ve sonraki mobilizasyon için
- Yaralanmış ya da opere kollateral ve/veya çapraz bağların güvenli stabilizasyonu için

Etki şekli:

- Dizin kollateral stabilizasyonu
- Post-operatif immobilizasyon
- Kontrollü mobilizasyon

Özellikleri:

- Kullanımı çok kolay, yeni, patentli, 'Quickset' menteşesi
- 10° - 15°'lik adımlarla açı limitasyonları
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° açılarda fleksiyon
- 0°, 10°, 20° 30° açılarda ekstansiyon
- 0°, 10°, 20° 30° açılarda immobilizasyon
- Kolay, rahat, klikle kapanabilen bant tokaları
- Şekil verilebilen metal yan barlar
- Kesilerek hastanın gereksinimlerine göre şekil verilebilen cilt dostu pedler
- Yan barlardaki kırma çizgileri sayesinde kısaltılabilme özelliği



protect ROM cool

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu ve immobilizasyon seçeneekli diz ortezi

ortez uzunluğu (cm)	short (kısa) : 57 long (uzun) : 63
---------------------	---------------------------------------

Endikasyonlar:

- Post-operatif immobilizasyon
- Diz yaralanmaları sonrası stabilizasyon ve sonraki mobilizasyon için
- Yaralanmış ya da opere kollateral ve/veya çapraz bağların güvenli stabilizasyonu için

Etki şekli:

- Dizin kollateral stabilizasyonu
- Post-operatif immobilizasyon
- Kontrollü mobilizasyon

Özellikleri:

- Kullanımı çok kolay, yeni, patentli, 'Quickset' menteşesi
- 10° - 15°'lik adımlarla açı limitasyonları
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° açılarda fleksiyon
- 0°, 10°, 20° 30° açılarda ekstansiyon
- 0°, 10°, 20° 30° açılarda immobilizasyon
- Kolay, rahat, klikle kapanabilen bant tokaları
- Şekil verilebilen metal yan barlar
- Kesilerek hastanın gereksinimlerine göre şekil verilebilen cilt dostu pedler
- Yan barlardaki kırma çizgileri sayesinde kısaltılabilme özelliği
- protect.ROM cool = açık versiyon



M.3®s OA

Uni-kompartmentalosteoartrit için tek menteşeli fonksiyonel diz ortezi

cm	sol-varus/sağ-valgus sol-valgus/sağ-varus
XS	: 31-37
S	: 37-45
M	: 45-51
L	: 51-57
XL	: 57-65
XXL	: 65-74

Endikasyonlar:

- Dizin ileri derecede unilateral, medial veya lateral osteoartriti ve artritinin konservatif tedavisi
- Cerrahinin kontraendike olduğu durumlarda sürekli bakım
- Korreksiyon osteotomisi ve diz replasmanı gibi muhtemel cerrahi prosedürlere karar verme sürecindeki bakım
- Tibia başının medial ve lateral kırıkları cerrahisi sonrasında vücut ağırlığını taşıma sırasındaki yükü azaltmak için

Etki şekli:

- 3-nokta prensibiyle lateral ve medial eklem aralığının düzeltilmesi
- Eklem etkilenen tarafında vücut ağırlığını taşıma sırasındaki yükü azaltarak sağlanan ağrı hafiflemesi
- Daha ileri kapsül irritasyonu ve sinoviti azaltır

Özellikleri:

- Tam düz eklem yüzeyi ile varus ve valgus açıları kişisel olarak ayarlanabilir; tedavi sürecindeki iyileşmeye bağlı olarak gereken varus ve valgus açıları tekrar düzenlenebilir
- Polisentrik eklem
- Anatomik alüminyum çerçeve
- Havali kondil pedler
- Düşük profilili, hafif iskelet ve menteşe yapısı
- Ortezin kolayca ve doğru takılabilmesini sağlayan numaralandırılmış bantlar
- Soft-grip ped materyali sayesinde mükemmel konfor
- 0°, 10° açılarda ekstansiyon limitasyonu



M.4®s

Fleksiyon / Ekstansiyon limitasyonu için physioglide menteşeli fonksiyonel rigid brace

cm	sol / sağ
XS	: 31-37
S	: 37-45
M	: 45-51
L	: 51-57
XL	: 57-65
XXL	: 65-74

Endikasyonlar:

- Çapraz bağ rüptürleri sonrası konservatif/postoperatif tedavi (izole veya eşlik eden yaralanmalarda)
- Menisküs lezyonlarıyla beraber lateral bağ rüptürleri sonrası konservatif/postoperatif tedavi
- İzole veya kombine instabile durumlarda konservatif tedavi

Etki şekli:

- 4 nokta prensibiyle optimal stabilizasyon
- Ekstansiyon ve fleksiyon limitasyonları sayesinde zararlı eklem hareketlerine karşı korur.

Özellikleri:

- Özel physioglide menteşesi dizin yuvarlanma ve kayma hareketlerini taklit eder ve güvenli bir tutuş sağlar.
- Esnek D-Rings sayesinde daha konforlu kullanım sunar.
- Bant ve pedlerde kullanılan yeni materyal sayesinde cildi tahriş etmez ve kaymaz.
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon



M.4®s OA

Varus veya valgus baskısını ortadan kaldıran 4-noktalı diz ortezi

cm	sol-varus/sağ-valgus sol-valgus/sağ-varus
XS	: 31-37
S	: 37-45
M	: 45-51
L	: 51-57
XL	: 57-65
XXL	: 65-74

Endikasyonlar:

- Özellikle unilateral osteoartritle kombine kompleks bağ instabilitelerinin konservatif tedavisi
- İleri unilateral osteoartritin konservatif tedavisi
- Tibia başı kırığı, kırıldak cerrahisi, menisküs onarımı, korreksiyon osteotomisi sonrası postoperatif basıncın azaltılması ve kompartmanların korunması
- Medial ya da lateral kompartman basınçlarının azaltılmasının gerektiği çapraz bağ instabiliteleri
- Diz instabilitelerinin fonksiyonel pre ya da postoperatif bakımı

Etki şekli:

- Koruma, stabilizasyon, ağrı giderilmesi ve mobilizasyonun restorasyonu
- Etkilenmiş kompartmanı yükü azaltacak şekilde uygun bir varus ya da valgus pozisyonuna getiren 3-nokta prensibiyle, medial ya da lateral kompartman basıncının hafifletilmesi

- Osteoartrite neden olan diz instabilitesinin etkisine karşı yönde çalışan 4-nokta prensibiyle dizin stabilizasyonu
- Hiperekstansiyona karşı koruma sağlanması ve ürünün fleksiyon/ekstansiyon limitasyonu imkanı sunması

Özellikleri:

- S profili sayesinde torsiyonel stabiliteyi geliştirirken, femur ve tibianın doğal hizalanmasını sağlar
- Polisentrik eklem
- Anatomik alüminyum çerçeve
- Düşük profilili, hafif iskelet ve menteşe yapısı
- Ortezin kolayca ve doğru takılabilmesini sağlayan numaralandırılmış bantlar
- Havali kondil pedler
- Soft-grip ped materyali sayesinde mükemmel konfor
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon



M.4 Anti-recurvatum

Genu recurvatum için fonksiyonel brace

cm	sol / sağ
XS	: 31-37
S	: 37-45
M	: 45-51
L	: 51-57
XL	: 57-65
XXL	: 65-74

Endikasyonlar:

- Genu recurvatum

Etki şekli:

- Aşamalı absorpsiyon sistemi, yürüme sırasında ekstansiyon fazı sürecinde diz eklem yüzeyindeki etkiyi azaltır

Özellikleri:

- 4-zincir prensibini esas alan polisentrik physioglide eklem
- Ultradüz, çok düşük ağırlıklı ve menteşe yapısı
- Kolay pozisyonlama
- Anatomik yapıya uygun şekil
- Physioglide eklem sayesinde diz hareketlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak
- Dize binen yükü absorbe etme özelliği
- Fleksiyon / ekstansiyon limitasyon özelliği

- Anterior tibial destek sağlarken gereksiz yüklenme ve friksiyondan kaçınır
- Popliteal açıklık





protect.4 OA

Anterior-posterior tibial yer değiştirmeyi kontrol eden 4-noktadan destekli ve varus/valgus baskısına bağlı ağrıyı ve yükü 3-noktadan hafifleten diz ortezi

cm	sol-varus/sağ-valgus sol-valgus/sağ-varus
XS	: 31-37
S	: 37-45
M	: 45-51
L	: 51-57
XL	: 57-65
XXL	: 65-74

Endikasyonlar:

- Özellikle unilateral osteoartritle kombine kompleks bağ instabilite-telerin konservatif tedavisi
- İleri unilateral osteoartritin konservatif tedavisi
- Tibia başı kırığı, kırıldak cerrahisi, menisküs tamiri, korreksiyon osteotomisi sonrası postoperatif basıncın azaltılması ve kompartmanların korunması
- Medial ya da lateral kompartman basınçlarının azaltılmasının gerektiği çapraz bağ instabilite-leri
- Diz instabilite-lerinin fonksiyonel pre ya da postoperatif bakımı

Etki şekli:

- Koruma, stabilizasyon, ağrı giderilmesi ve mobilizasyonun restorasyonu
- Etkilenmiş kompartmanı yükü azaltacak şekilde uygun bir varus ya da valgus pozisyonuna getiren 3-nokta prensibiyle, medial ya da lateral kompartman basıncının hafifletilmesi
- Osteoartrite neden olan diz instabilitesinin etkisine karşı yönde çalışan 4-nokta prensibiyle dizin stabilizasyonu

- Hiperekstansiyona karşı koruma sağlanması ve ürünün fleksiyon/ekstansiyon limitasyonu sunması

Özellikleri:

- Diz eklemine yakından uygulanan keskin ve etkili varus/valgus baskısı
- 3 noktadan baskı sistemi için iskelet içinde geniş, etkin darbe emici pedler
- Torsiyonel kuvvetleri azaltmak için şekil verilebilen iskelet tasarımı
- Ultradüz, çok düşük ağırlıklı ve çıkıntısız iskelet ve menteşe yapısı
- Etkilenmiş kompartmanı yükü azaltacak şekilde uygun bir varus ya da valgus pozisyonuna getiren 3-nokta prensibiyle, medial ya da lateral menteşe ile kompartman basıncının hafifletilmesi
- Osteoartrite neden olan diz instabilitesinin etkisine karşı yönde çalışan 4-nokta prensibiyle dizin stabilizasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon



M.4® X-lock

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu, 4-noktalı rijid atel

cm	XS	S	M	L	XL	XXL
	: 31-37	: 37-45	: 45-51	: 51-57	: 57-65	: 65-74

Endikasyonlar:

- Çapraz bağ rüptürleri gibi ligament yaralanmaları sonrası menisküs dışıklarının post-operatif tedavisi
- Diz ekstansörlerinin tendon rüptürleri sonrası post-operatif tedavisi
- Diz kapağı çevresi ve troklear oluğa yönelik kırıldak cerrahisi
- MPFL tamiri gibi diz kapağını sınırladıcı operasyonlar veya patellardislokasyonlar sonrası bakım
- Patellardislokasyonların konservatif tedavisi

Etki şekli:

- Tam ekstansiyonda sağlam kilitleme. Bu sayede ekstansiyon pozisyonunda aksiyal yüklenmeye olanak sağlar
- Basıncı doğan kompresyon dışıklarının stabilitesini artırır.

- Serbest hareketler için sağladığı kolaylık sayesinde yük altında değilken fonksiyonel egzersizlere izin verir.
- Kas atrofisi önlenir.

Özellikler:

- Tam ekstansiyonda sağladığı güvenilir kilitleme özelliği ile hasta serbest ve desteksiz yürüyebilir.
- Su geçirmez köpük pedleri sayesinde duş alırken kullanılabilir.
- Ayarlanabilir, ayrı yastıkları sayesinde ameliyat dışıkları üzerinde basınç oluşturmaz.
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon limitasyonu



protect.4

Fleksiyon / Ekstansiyon ayarlı fonksiyonel rigid brace

cm	sol / sağ
XS	: 31-37
S	: 37-45
M	: 45-51
L	: 51-57
XL	: 57-65
XXL	: 65-74

Endikasyonlar:

- İzole ACL ya da ACL ve PCL kombine rüptürleri
- Kollateral ligament rüptürlerine bağlı instabilite-ler
- Kombine instabilite-lerin konservatif bakımı

Etki şekli:

- Fleksiyon / ekstansiyon limitasyonu sağlayan fonksiyonel rigid brace
- 4 nokta prensibiyle optimal stabilizasyon
- Anterior ve posterior tibial yer değiştirmeyi kısıtlar
- Diz eklemine kollateral ligament stabilizasyonu
- Hareket açıklığının limitlendirilmesiyle hiperekstansiyonun engellenmesi
- Medial rotasyonun azaltılması

Özellikleri:

- Polisentrik menteşeler
- Anatomik olarak hazırlanmış iskelet
- Düşük profilili, hafif iskelet ve menteşe yapısı
- Şekil verilebilen alüminyum iskelet sayesinde kişiye göre uyum sağlayabilme
- Ortezin kolayca ve doğru takılabilmesini sağlayan numaralandırılmış bantlar
- Havalı kondil pedler
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 60°, 75°, 90° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°de immobilizasyon.



Collamed®

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu uzun, fonksiyonel soft brace

cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	: 31-37	: 37-45	: 45-51	: 51-57	: 57-65	: 65-74	: 74-84

Özellikleri:

- 4-zincir bağlantısı prensibini temel alan polisentrik physioglide menteşeler
- Ön ve popliteal açıklıklara sahip çepeçevre saran dizaynı ile mükemmel uyum
- Esnek, hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip medi Airtex materyal
- Temas sporlarında sorunsuz kullanım
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon

Endikasyonlar:

- Kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisi
- Çapraz bağların hafif instabilite-leri
- Menisküs yaralanmaları
- Diz eklemine travmatik ve dejeneratif deformite-leri
- Kronik instabilite

Etki şekli:

- Ayarlanabilir physioglide menteşesi ile hiperekstansiyonun engellenmesi ve hareket açıklığının sınırlandırılması
- Uzun yan barlar sayesinde çok iyi kollateral stabilizasyon
- Kompresif ve propriyoseptif etkili soft brace

**Stabimed®**

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu
kısa, fonksiyonel soft brace

cm	XS : 31-37
	S : 37-45
	M : 45-51
	L : 51-57
	XL : 57-65
	XXL : 65-74
	XXXL : 74-84

Endikasyonlar:

- Kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisi
- Çapraz bağların hafif instabiliteleri
- Menisküs yaralanmaları
- Diz ekleminin travmatik ve dejeneratif deformiteleri
- Kronik instabilite

Etki şekli:

- Ayarlanabilir physioglide menteşesi ile hiperekstansiyonun engellenmesi ve hareket açıklığının sınırlandırılması
- Uzun yan barlar sayesinde çok iyi kollateral stabilizasyon
- Kompresif ve propriyoseptif etkili soft brace

Özellikleri:

- 4-zincir bağlantısı prensibini temel alan polisentrik physioglide menteşeler
- Ön ve popliteal açıklıklara sahip çepeçevre saran dizaynı ile mükemmel uyum
- Esnek, hava geçiren ve nem uzaklaştırmaya özelliğe sahip **medi Airtex** materyal
- Temas sporlarında sorunsuz kullanım
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon

**Stabimed® pro**

Kısa, fonksiyonel soft brace

cm	XS : 31-37
	S : 37-45
	M : 45-51
	L : 51-57
	XL : 57-65
	XXL : 65-74

Endikasyonlar:

- Diz ekleminin hafif ve orta dereceli instabiliteleri
- Kollateral bağların hafif ve orta dereceli zorlanmaları
- Menisküs yaralanmaları

Etki şekli:

- Dizin kollateral stabilizasyonu
- Hiperekstansiyonun engellenmesi
- Kompresif ve propriyoseptif etkili soft brace

Özellikleri:

- Tam düz, brace içine gizlenmiş polisentrik menteşeler ve balenler; temas sporlarında sorunsuz kullanım
- Esnek, hava geçiren ve nem uzaklaştırmaya özelliğe sahip **medi Airtex** materyal
- Popliteal açıklık ile çok rahat kullanım
- Çekerek giyme modeli

**medi PT control**

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu
patellar yer değiştirmeyi
kontrol eden soft brace

cm	sol / sağ
	XS : 31-37
	S : 37-45
	M : 45-51
	L : 51-57
	XL : 57-65
	XXL : 65-74

Endikasyonlar:

- Patellafemoral ağrı sendromu
- Patellar kondropati
- Retropatellar osteoartrit
- Postoperatif ve posttravmatik irritasyonlar
- Lateral release cerrahisi sonrası fleksiyon/ekstansiyonu kısıtlamak ve patellayı stabilize etmek için
- Patella ve diz instabiliteleri

Etki şekli:

- Dizin kollateral stabilizasyonu
- Hiperekstansiyonun ve hareket açıklığının limitasyonu
- Patellayı stabilize eden desteği sayesinde patellar lateralizasyonun düzeltilmesi
- Kompresif ve propriyoseptif etkili yumuşak brace

Özellikleri:

- 4-zincir bağlantısı prensibini temel alan polisentrik physioglide eklemler
- Esnek, hava geçiren ve nem uzaklaştırmaya özelliğe sahip **medi Airtex** materyal
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda ekstansiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° açılarda fleksiyon limitasyonu
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45° açılarda immobilizasyon
- Kişiyeye göre ayarlanabilen patella stabilizasyon desteği ve hava-yastıkçığı sayesinde patellar kaymasının tam olarak düzeltilmesi

**genumedi PT**

Patellar lateralizasyon
durumlarında kas dengesini
kolaylaştıran diz desteği

cm	A	B
	I : 25-28	37-40
	II : 28-31	40-43
	III : 31-34	43-46
	IV : 34-37	46-49
	V : 37-40	49-52
	VI : 40-43	52-55
	VII : 43-46	55-58

Endikasyonlar:

- Patellar lateralizasyon, hipermobil patella, kas kuvveti dengesizlikleri, patellanın hareket boyunca izlediği yolun bozulması gibi patella femoral ağrı sendromlarına yol açan durumlarda
- Cerrahi sonrası patella stabilizasyonu gerektiğinde

Etki şekli:

- Kuvvet dengesizliklerini kompanse etmesi için patellayı yönlendiren kassal yapılar üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
- Vastuslateralis kas tonusunu azaltır.
- Vastusmedialis kasını aktive eder.
- Lateralden desteklenmiş silikon halka, patellanın femoral olukta düzgün hareket etmesine

yardımcı olur.

- Düzgün bir yönlendirme ve eklemin stabilizasyonu için gerekli propriyoseptif basıncı sağlar.

Özellikleri:

- Kusursuz yerleştirilmiş pedleri sayesinde vastuslateralis kasını gevşetip vastusmedialis kasını aktive edecek nörofizyolojik friksiyon sağlar
- Bantın gerilmesi ve bu sayede vastuslateralis kası üzerindeki basıncı isteğe göre ayarlanabilir.
- Patellayı çevreleyen ve lateral olarak desteklenmiş silikon halka trokleartikülasyona yardımcı olarak patellanın kaymasını düzeltir.
- Dizin bükülü olduğu hareketlerde bile kırılmayan, silikonun medial ve laterale hareketini engelleyen "kaymayan sistem"



Genumedi®

Patellar silikon pedli
fleksible balenli örme dizlik

cm	A	B
I : 25-28	37-40	
II : 28-31	40-43	
III : 31-34	43-46	
IV : 34-37	46-49	
V : 37-40	49-52	
VI : 40-43	52-55	
VII : 43-46	55-58	

Endikasyonlar:

- Hafif diz instabilitesi
- Artiküler efüzyon ve şişlik
- Kronik postoperatif ve posttravmatik enflamasyon
- Patellar kondropati
- Osteoartrit ve artrit
- Menisküs hasarı
- Patellofemoral ağrı sendromu

Etki şekli:

- Kompresif dokuma ve içine yerleştirilmiş silikonun yol açtığı masaj etkisi kan dolaşımını artırarak hematoma ve ödemin daha çabuk uzaklaştırılmasını sağlar
- Dikişsiz diz desteği propriyosepsiyonu iyileştirerek kasal desteği artırır (dizin stabilizasyonu)

Özellikler:

- Patellayı çevreleyen, özel tasarımı silikon halka

- Silikonun medial ve laterale hareketini engelleyen "kaymayan" sistem
- Esnekliği yüksek, aktif hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip olan **clima-comfort** kumaş
- Özel dokunmuş **comfort-zone** dizin arkasındaki baskıyı uzaklaştırır ve sıkışmayı engeller
- Silikon halkanın özel iç kenarı patella üzerindeki baskıyı minimuma indirir



Genumedi® plus

Silikonun medial ve laterale hareketini engelleyen "kaymayan" sistem



medi elastic knee support

Elastik örme dizlik
(standart, silikon bantlı, fleksible balenli, flexible balenli ve patellası açık modellerde)

cm	A	B
I : 25-28	37-40	
II : 28-31	40-43	
III : 31-34	43-46	
IV : 34-37	46-49	
V : 37-40	49-52	
VI : 40-43	52-55	
VII : 43-46	55-58	

Endikasyonlar:

- Postartroskopi ve postoperatif durumlar dahil dizin tüm enflamasyon ve zorlanmaları
- Kas ve bağ zorlanmaları
- Bursitler
- Kronik dejeneratif eklem hastalıkları
- Osteoartrit ve artrit

Etki şekli:

- İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisinin de katkısıyla dizi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır

Özellikler:

- Hafif, hava geçiren materyal ürünün giyilmesini kolaylaştırarak hasta uyumunu ve terapötik sonuçları iyileştirir
- Kompresyon: ccl 2

- **Ürün 601:** çift yöne esnek, anatomik şekilli
- **Ürün 602:** 601 ile aynı, ek olarak iç tarafta egzersiz sırasında kaymayı ve dönmeyi engelleyen üst silikon bandı mevcut
- **Ürün 603:** 601 ile aynı, ek olarak ikiye adet medial ve lateral çelik spiral balen mevcut
- **Ürün 605:** 601 ile aynı, ek olarak patella açık ve ikiye adet medial ve lateral çelik spiral balen mevcut



patella tendon support

Patella tendon desteği

tek beden

Endikasyonlar:

- Patellofemoral malformasyona bağlı ağrı
- Diz ekleminin hafif instabilite
- Osgood Schlatter
- Jumper's knee (koşucu dizi)

Etki şekli:

- Quadriceps tendonuna uygulanan baskı propriyoseptif performansı artırarak kasların diz eklemini desteklemesine yol açar

Özellikler:

- Anatomik şekilli kesim
- Cilt dostu pamuklu-likra materyal



Levamed® active

Stabilize edici bant sistemli ayak bileği desteği

cm	I : 17-20
	II : 20-22
	III : 22-24
	IV : 24-26
	V : 26-28
	VI : 28-30

Endikasyonlar:

- Tekrar eden supinasyon travmalarına sebep olan kronik ligament instabiliteleri (ayak bileği dönmesi)
- Kapsülün fazla gerildiği ayak burkulmaları
- Deltoid ligament yaralanmalarının tedavisinin ikinci fazında
- Alçı gerektirmeyen kırıkların tedavisinde
- Talocrural ve subtalar eklemlerin akut veya kronik, travma veya cerrahi sonrası irritasyonu
- Cerrahi gerektirmeyen bağ doku yaralanmalarının konservatif tedavisi

Etki şekli:

- Kişiye göre ayarlanabilir ve çıkarılabilir, elastik ve elastik olmayan kısımlara sahip bant sistemi

- Burkulmaya karşı ekstra tutuş ve stabilizasyon koruması
- Entegre edilen silikon pedler sayesinde masaj etkisi
- Ödem ve hematoma azaltılması
- Proprioseptif basınç
- Eklemlerin stabilizasyonu ve hareket için düzgün yönlendirilmesi

Özellikler:

- Medial ve lateralde entegre silikon pedlere sahip anatomik kesimli destek
- Esnekliği yüksek, aktif hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip olan clima comfort dokuma
- Ayağın üst kısmına gelen yerdeki özel dokunmuş comfort-zone sıkışmayı önler



Levamed® stabili tri

Ayak bileği yaralanmalarının fonksiyonel bakımı için üç etkili modüler ortez

cm	I : 17-21
	II : 21-24
	III : 24-27
	IV : 24-30

Endikasyonlar:

- Ayak bileği burkulmaları (grade 1-3)
- Talocrural ve subtalar eklemin kronik instabilitesi
- Ayak bileği eklemlerinin ligamentlerine yönelik cerrahi sonrası bakım

Etki şekli:

- Modüler dizaynı fonksiyonel tedaviyi destekler
- Güvenli ve iyi bir tedavi ve hastanın mobilizasyonu için iyileşmenin üç fazına da uyumludur.
- Talusu kilitleyen dil talusun öne kaymasını azaltır.
- Medial stabilize eden parçası ayağın lateral bölgesini destekler ve baskıyı ortadan kaldırır.

- Stabilize edici bant hafif pronasyonu yönlendirir ve iyileşmeye yardım eder.
- Basınç oluşturacak şekilde dokunmuş özel yapısı sayesinde proprioseptiyonu artırır, ödem ve hematoma emilimini hızlandırır.

Özellikler:

- Rahatça giyilip çıkartılabilmesi için özellikle genişçe açılan dil
- Çapraz bağcıklı talus kilit dili değişik basınç ayarlamalarına olanak sağlar ve kilikli bağcıkları sayesinde kolayca tutulur.
- Stabilize edici parçasının medial yerleşimi ayağın yaralanmış lateral bölgesini korur ve yüksek konfor sağlar.stabilizasyonu)



Levamed®

Clima-comfort örme, silikon pedli, malleol destekli ayak bilekliği

cm	I : 17-20
	II : 20-22
	III : 22-24
	IV : 24-26
	V : 26-28
	VI : 28-30

Endikasyonlar:

- Ayak bileği ekleminin hafif instabiliteleri
- Futbolcu ayak bileği, burkulmalar
- Artrit ve osteoartrite bağlı eklem efüzyonları
- Kronik posttravmatik ve postoperatif enflamasyon

Etki şekli:

- Kompresif dokuma ve içine yerleştirilmiş silikonun sağladığı masaj etkisi kan dolaşımını artırarak hematoma ve ödemin daha çabuk uzaklaştırılmasını sağlar
- Destek propriyosepsiyonu geliştirerek daha iyi musküler destek sağlar (ayak bileği stabilizasyonu)

Özellikler:

- Medial ve lateralde entegre silikon pedlere sahip anatomik kesimli destek
- Esnekliği yüksek, aktif hava geçirgen ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip olan clima-comfort dokuma
- Ayağın üst kısmına gelen yerdeki özel dokunmuş comfort-zone sıkışmayı önler



Achimed®

Clima-comfort örme, anatomik forma uygun entegre silikon pedli aşıl tendon desteği

cm	I : 17-20
	II : 20-22
	III : 22-24
	IV : 24-26
	V : 26-28
	VI : 28-30

Endikasyonlar:

- Aşıl tendonunun akut ve kronik enflamasyonu
- Posttravmatik ve postoperatif enflamasyon
- Aşilodini
- Aşıl bursiti

Etki şekli:

- Kompresif dokuma ve içine yerleştirilmiş silikonun sağladığı masaj etkisi kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır
- Aşıl tendonu için yumuşak koruyucu ped
- Opsiyonel olarak içine yerleştirilebilen topuk yükselticiler aşıl tendonundaki ağırlı gerginliği azaltır

Özellikler:

- Entegre silikon pedli anatomik kesimli destek
- Esnekliği yüksek, aktif hava geçirgen ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip olan clima-comfort dokuma
- Ayağın üst kısmına gelen yerdeki özel dokunmuş comfort-zone sıkışmayı önler
- Aynı topuk yükselticiler ile aşıl tendonundaki gerginliği azaltır (bacak uzunluğunu eşitlemek için çift taraflı kullanılmalıdır)



medi elastic ankle support

İki yönlü esneyebilen, topuğa oturan, orta dereceli kompresif ayak bilekliği

cm	I : 17-20
	II : 20-22
	III : 22-24
	IV : 24-26
	V : 26-28
	VI : 28-30

Endikasyonlar:

- Ayak bileğinin enflamasyon ve zorlanmaları
- Kas zorlanmaları
- Ezilme
- Spor aktivitelerinde profilaktik ve terapötik amaçlı

Etki şekli:

- İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisinin de katkısıyla eklemi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır

Özellikler:

- Hafif, hava geçiren materyal ürünün giyilmesini kolaylaştırarak hasta uyumunu ve terapötik sonuçları iyileştirir
- Kompresyon: ccl 2
- Eklem hareketlerini rahatlatır



M.step®

Köpük –jel pedli fonksiyonel ayak bilekliği

- pediatrik
- atletik
- standart

Endikasyonlar:

- Ayak bileği fibular ligament yaralanmalarının konservatif ve postoperatif tedavisi
- Ayak bileği eklemının kronik instabiliteleri

Etki şekli:

- Ürünün sert dış iskeleti pronasyon ve supinasyon hareketlerinde çok iyi stabilizasyon sağlar
- Köpük-jel ped çok değişik anatomik yapılara uyabilir ve aynı düzeyde bir kompresyon sağlar

Özellikler:

- Kolay ayarlanabilir topuk bandı

- Tek tip standart ölçü “tek ölçü herkese uyar”
- Üç uzunluk versiyonu mevcuttur: standart (uzun versiyon), sportif (kısa versiyon), pediatrik (çocuk versiyonu)
- Yumuşak cilt dostu yüzeye birlikte, çok hafif köpük-jel ped
- Tamamen pedle desteklenmiş sert kısım kenarları
- Sadece iki bant hızlı ve güvenli kapanmaya izin verir; pedler sert kısımdan ayrılabilir
- Köpük-jel pedin uyarlanabilme özelliği sayesinde medi M.step hem sağ hem sol ayak bileği için kullanılabilir



protect.CAT walker

Ayak/bilek/tibia ve fibula stabil kırıklar için sabitleyici hafif ve konforlu yürüme botu

ayakkabı no	S : 36-40
	M : 40-44
	L : 44-47

Özellikler:

- Air Cell System: Alt bacağı, bileği ve ayak kısmını çevreleyen hava hücreleri sayesinde dengeli kompresyon ve yüksek giyim konforu sağlar
- Taban: Doğal ve güvenli yürüyüş için düşük profilili rocker taban
- Parmak Korumucu: Kolay ayarlanabilen ve opsiyonel olarak çıkarılabilen parmak koruyucu
- Talus bantlar: Özel talus bantlar anterior talar kaymayı azaltır
- Entegre şişirme sistemi: Entegre hava pompası ve vanası ile hastaya basıncı kendi kendine düzenleyebilme imkanı sunar

Opsiyonel aksesuar

- Aşıl tendon rüptürü için topuk kama seti
- Korumucu hijyen kılıfı

Endikasyonlar:

- Post Operatif
- Bağ rekonstrüksiyonu ve/veya refleksiyonu
- Yumuşak doku ve tendon yaralanmaları tedavisi
- Konservatif
- 2. ve 3. Derece bağ lezyonları
- Tenosinovit
- Stabil ayak ve bilek kırıkları: metatarsal kırıklar, talus kırıkları ve malleolar kırıklar
- İleri endikasyonlar
- Aşıl tendon rüptürü ve yaralanmaları

Etki şekli:

- Güvenli ve etkili immobilizasyon
- Kısa modellerde 3 adet uzun modellerde 4 adet bant sayesinde yüksek stabilizasyon sağlar ve anterior talar kaymayı azaltır

Not: protect.CAT Walker 120 kg'den ağır hastalar için uygun değildir.



medi ROM® walker

ROM hareket aralığı kontrolü sağlayan walker

ayakkabı no	S : 32-38
	M : 38-43
	L : 43-48

Endikasyonlar:

- Ligament, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrası
- Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisi
- Talocrural eklem kırıkları dislokasyonu
- Ön ve orta ayak kısımları ve ayak bileği yaralanmalarının konservatif tedavisi
- Ligament refleksiyonu ve peroneal tendon dislokasyonu sonrası
- Kronik ligamentöz instabilite için
- Talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarının takip tedavisinde
- Aşıl tendon rüptürünün konservatif veya cerrahi tedavisinden sonra erken fonksiyonel terapi için

Etki şekli:

- Opsiyonel sabit eklem açısı veya kısmi hareketlilik; bu özellik erken fonksiyonel mobilizasyona izin verir

- Plantar fleksiyon : 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Dorsifleksiyon : 20°, 10°, 0°
- Her 10° açı ayarında immobilizasyon
- Özel tabanı sayesinde fizyolojik yürüyüş

Özellikler:

- Kullanımı çok kolay yeni, patentli “Quickset” menteşesi
- Her ayak bileği çevresine uyarlanabilen 3 ölçüsü mevcuttur
- Alt bacağın stabilizasyonu için plastik tibia ve baldır kırıklar
- Ayagın orteye mükemmel uyumu için ayrı ped seti
- Sorunsuz yara bakımı ve kişisel hijyen
- Aşıl tendonunun rahatlatılması için 3 topuk yükselticiden oluşan bir set mevcuttur (opsiyonel)
- Ayrıca ROM menteşesi olmayan **medi walker boot** da bulunmaktadır



medi foot support tabanlıklar çeşitli fonksiyonları ve avantajları olan, yenilikçi yardımcı ürünlerdir. Medi footsupport ürün yelpazesi farklı uygulama alanlarına uygun çeşitli tabanlıklar içerir. Malzeme bileşeni ve yapısı sayesinde her tabanlık farklı dolgu ve destekleme özellikleri sunar. Artrit, plantar fasit veya halluks rijitus gibi tıbbi belirtilere yönelik tabanlıklar ağrının giderilmesine yardımcı olur.

- **Absorbsiyon özelliği:** Tabanlığın absorbe etme özelliği ile ayağı basınç noktalarında korur ve ayağın özel bölgelerinde hedeflenen rahatlamayı sağlar.
- **Destek:** Tabanlığın destekleme fonksiyonu ayağın özel bölgelerinde rahatlatma sağlar, yürüme özelliklerini iyileştirir ve eklemlerin stabilizasyonuna yardımcı olur.
- **Ağrı giderme:** Tabanlığın tasarımı ve fonksiyonel materyallerin kombinasyonu ağrının azalmasına yardımcı olur.
- **Isıyla şekil alma özelliği:**

medi footsupport Junior : 100-120C (200-250F) arası sıcaklık ayarı kullanılarak belirli bölgeleri değiştirilebilir.

medi footsupport Comfort, medi footsupport Comfort pro : 100-120C (200-250F) arası sıcaklık ayarı kullanılarak belirli bölgeleri değiştirebilir.

medi footsupport Heel Spur, medi footsupport Heel spur pro : Isıyla şekil alma özelliği yoktur.

medi footsupport Control, medi footsupport Control Slim : Isıyla şekil alma özelliği yoktur.

medi footsupport Business, medi footsupport Business slim : 100-120C (200-250F) arası sıcaklık ayarı kullanılarak belirli bölgeleri değiştirebilir.

medi footsupport Natural : 100-120C (200-250F) arası sıcaklık ayarı kullanılarak belirli bölgeleri değiştirebilir.



medi foot support JUNIOR (PIA-18)

Tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38
	2 : 39-40
	3 : 41-42
	4 : 43-44
	5 : 44-45

Junior tabanlık özellikle çocukların ayakları için maksimum destek sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Endikasyon:

Düz taban, valgus ayak

Etki Şekli/Özellikler:

- Mükemmel destek ve kontrol için derin topuk desteği
- Termoplastik malzeme ısıyla kolayca şekil alabilir.
- Ayak için ideal yönlendirme ve desteği sunan çok tabakalı iç kısım
- Ayakkabıya sıkıca yerleşmeyi sağlayan, kayma dirençli alt kaplama



medi foot support COMFORT (PIA-01) COMFORT PRO (PIA-02)

Tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38
	2 : 39-40
	3 : 41-42
	4 : 43-44
	5 : 44-45

Comfort tabanlık, diyabet ayak veya artritli ayak gibi ilave dolgu gerektiren ayaklar için özel olarak tasarlanmıştır.

Endikasyon:

Diyabet, artrit, nasırlı cilt yapısı

Etki Şekli/Özellikler:

- Kişiye uyarılma için önceden yumuşatılmış yapı
- Ayak için konforlu bir ortam sağlayan antibakteriyel alt kaplama
- Yumuşak dolgulu bir ayakkabı tabanı sağlayan çok tabakalı yapı
- Longitudinal arkın desteklenmesine yönelik hafif iç kısım
- Transvers arkın desteklenmesine yönelik entegre metatarsal dolgu (Comfort Pro)



medi foot support
HEELSPUR (PIA-05)
HEELSPUR PRO (PIA-06)

Tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38 2 : 39-40 3 : 41-42 4 : 43-44 5 : 44-45
----------------	---

Heel spur topuk dikenli tabanlık, ayak ağrınızı gidermek üzere topuk kısmındaki ve plantar fasya çevresindeki baskıyı azaltır.

Endikasyon:

Topuk dikenli, plantar fasit

Etki Şekli/Özellikler:

- Topuk çevresi ve plantar çevresi için hedefli yumuşak dolgu takviyesi
- Longitudinal arkın desteklenmesine yönelik çok tabakalı iç kısım
- Ağrılı bölgelerin rahatlaması
- Transvers arkın desteklenmesine yönelik entegre metatarsal dolgu



medi foot support
CONTROL (PIA-15)
CONTROL SLIM (PIA-16)

Tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38 2 : 39-40 3 : 41-42 4 : 43-44 5 : 44-45
----------------	---

Control tabanlık ağrı veren eklemleri kontrollü yuvarlama hareketi sayesinde dengeleyerek ayak ağrısını giderir.

CONTROL

Endikasyon:

Halluks rijitus, daha sık kontrol gerektiren ayak sorunları.

CONTROL SLIM

Endikasyon:

Halluks rijitus, daha yüksek kontrol ve duruş düzeltmesi gerektiren ayak sorunları

Etki Şekli/Özellikler:

- Dar alana sahip ayakkabılar için tasarlanmış ince versiyon.
- Ayak başparmağındaki metatarsofalangeal eklemin rahatlatılması
- Kullanım sırasında rahatlık sağlayan kaliteli kadife kaplama
- Ayak başparmağındaki metatarsofalangeal ekleme stabilizasyonu ve longitudinal arka destek için uzatılmış iç kısım.



medi foot support
BUSINESS (PIA-09)
BUSINESS SLIM (PIA-10)

Tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38 2 : 39-40 3 : 41-42 4 : 43-44 5 : 44-45
----------------	---

Business tabanlık, şık ve iş hayatına uygun ayakkabılar gibi dar alana sahip ayakkabılar için ayağınıza mükemmel destek konfor sağlar

BUSINESS

Endikasyon:

Düztaban, hafif valgus ayak, yayvan ayak

BUSINESS SLIM

Endikasyon:

Düztaban, hafif valgus ayak, hafif yayvan ayak

Etki Şekli/Özellikler:

- Şık ayakkabılar ile alçak ve orta topuklu ayakkabılarda kullanım için özel ince tasarım
- Kullanım sırasında rahatlık sağlayan kaliteli kadife kaplama
- Longitudinal arkın desteklenmesine yönelik çok tabakalı iç kısım
- Baskı gören bölgelere özel destekleme
- Şık ve iş hayatına uygun ayakkabılar için rahatlatıcı tabanlık



medi foot support
NATURAL (PIA-12)

Tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38 2 : 39-40 3 : 41-42 4 : 43-44 5 : 44-45
----------------	---

Natural tabanlık, ayağınıza uygun destek sağlar ve mükemmel ve doğal kullanım konforu sunar.

Endikasyon:

Düztaban, valgus ayak, yayvan ayak

Etki Şekli/Özellikler:

- Kaliteli deri kaplama kullanım sırasında eşsiz bir rahatlık sağlar.
- Dar alana sahip ayakkabılar için tasarlanmış ince hatlı tasarım
- Transvers arkın desteklenmesine yönelik damla şekilli metatarsal dolgu
- Ayak biyodinamikleri üzerinde olumlu etki
- Longitudinal arkın desteklenmesine yönelik özel şekilli iç kısım



protect.Insoles

Silikon tabanlık

ayakkabı no	1 : 37-38
	2 : 39-40
	3 : 41-42
	4 : 43-44
	5 : 44-45

Endikasyonlar:

- Pes planus
- Genel topuk ağrıları
- Şok absorbe edici olarak
- Plantar fasiit
- Fatpadin ağrılı durumları
- Ön ayakta ve parmaklaraki bozukluklar
- Eklem ağrıları (arthralji)

Etki şekli:

- Yumuşak taban basınca duyarlılığın azaltılması ve ayak tabanında problemleri durumların giderilmesi

- Bilek, diz ve kalça eklemlerine olduğu kadar omurgaya olan etkilerin de giderilmesi

Özellikler:

- Kaliteli silikondan üretilmiş, cilde zararı olmayan ve kaymayan bir yapı
- Yumuşak noktalar sayesinde ayak tabanındaki duyarlı bölgeler için özel bir taban yapısı
- Hijyenik ve yıkanabilir malzeme



protect.Heel soft

Silikon topukluk

ayakkabı no	1 : 36-38
	2 : 39-41
	3 : 42-44

Endikasyonlar:

- Aşilodin – tensomyopati
- Topuk diken
- Artroz
- Haglunds deformasyonu
- Plantar fasiit
- Kalkaneal ağrı
- 1 cm'ye kadar olan bacak uzunluğu farklılıkları

Etki şekli:

- Yumuşak taban ve yatıştırıcı masaj etkisi
- Basınç nedeniyle topukta oluşan semptomların azaltılması

- Calf kas sisteminin, tendon ve ligamentlerin rahatlatılması
- Bilek, diz ve kalça eklemlerine olduğu kadar omurgaya olan etkilerin de giderilmesi

Özellikler:

- Kaliteli silikondan üretilmiş, cilde zararı olmayan ve kaymayan bir yapı
- Yumuşak noktalar sayesinde, duyarlı topuk alanı için özel bir taban yapısı
- Hijyenik ve yıkanabilir malzeme



protect.Forefoot cushion

Silikon transvers ark takviyesi

sol / sağ
tek beden

Endikasyonlar:

- Ayakta metatarsal bölge için yumuşak destek



protect.Bunion cushion

Bunyon koruyucu

tek beden

Endikasyonlar:

- Bunyonlarda hızlı ve kolay bir şekilde ağrıyı hafifletme





medi Collar Soft kidz

Cerrahi boyunluk

cm	A	B
1	18-22	5
2	22-28	6
3	28-33	7

Endikasyonlar:

- Boyun ve omuzda ağrı ve tutulmalar
- Boyun osteoartriti
- Boyun kas spazmları (torticollis)
- Boyun omurga incinmesi
- Boyun instabilitesi
- Romatizmal ağrılar

Etki Şekli/Özellikler:

- Boyuna destek ve stabilite sağlar
- Isıtıcı etkisi ile iyileşmeye daha fazla yardımcı olur



medi Clavicle Support kidz

Klavikula desteği

yaş	1	2
	3-8	8-12

Endikasyonlar:

- Post-travmatik ve post-operatif kırıklar
- Akromioklavikular kayma

Etki Şekli/Özellikler:

- Güvenli ve emniyetli sabitleme
- Kemiklerde doğru birleşmeye katkı sağlama



medi Armschlinge kidz

Omuz sabitleme desteği

yaş	1	2	universal
	3-8	8-12	12+

Endikasyonlar:

- Omuz cerrahisi sonrası immobilizasyon
- Omuz çıkıkları

Etki Şekli/Özellikler:

- Omuz, üst kol ve dirsekte stresi azaltır, rahatlık sağlar
- Omza adapte olur ve kolda immobilizasyon sağlar



medi Shoulder Sling kidz

Sabitleyici omuz eklem desteği

yaş	1	2
	3-8	8-12

Endikasyonlar:

- Omuz burkulma/zedelenmeleri
- Omuz kayması
- Rotator cuff lezyonu
- Humerusta stabil subkapital kırıklar
- Skapular kırıklar

Etki Şekli/Özellikler:

- Omuz ve üst kolun stabil fiksasyonu
- Göğüs bandı sayesinde ekstra stabilizasyon



medi Epico ROMs kidz

Mobilizasyon için dirsek ortezi

cm	sol / sağ
	S : 24-29

Endikasyonlar:

- Dirsek kayması konservatif tedavisi (ikincil zararlar olmadan)
- Medial veya lateral epikondillerde kırıklar için ortotik koruma
- Protez implantasyonu sonrasında post operatif koruma
- Distal humerustaki stabil kırıkların fonksiyonel takip tedavisi
- Dirsek artrolizisi sonrası geçici immobilizasyon

Etki Şekli/Özellikler:

- Bireysel tedavi için ortezler
- Alt ve üst kolu sabitleyerek dirsek immobilizasyonu sağlanması
- 0 ile 120 derece arasında 10'ar derecelik fleksiyon ve ekstansiyon ayarı



medi Manumed kidz

Stabilize splintli bilek desteği

cm	sol / sağ
	I : 10-11 II : 11-13 III : 13-14 IV : 15

Endikasyonlar:

- Bilekte burkulma/zorlanmalar
- Bilekte post operatif immobilizasyon
- Bilek tendonlarında enflamasyon veya başka bozukluklar
- Romatizmal bozukluklarda inflamatuvar fazlar

Etki Şekli/Özellikler:

- Bilekte stabilizasyon



medi Classic kidz

Immobilizasyon desteği

ortez	1 : 21
uzunluğu	2 : 26
(cm)	3 : 31
	4 : 40

Endikasyonlar:

- Post operatif immobilizasyonlar post operatif ağrı durumları
- Patella çıkıkları sonrası

Etki Şekli/Özellikler:

- Diz immobilizasyonu



medi ROM kidz

Fleksiyon ekstansiyon ayarlı ve immobilize fonksiyonlu kapsamlı diz desteği

ortez	short (kısa) 25
uzunluğu	long (uzun) 35
(cm)	

Endikasyonlar:

- Diz operasyonları sonrası
- Diz incinmeleri sonrası immobilizasyon ve sonrasında mobilizasyon
- Kollateral bağların zedelenmesi veya cerrahi müdahale sonrası güvenli ve emniyetli stabilizasyon

Etki Şekli/Özellikler:

- Bilekte stabilizasyon



M.step® kidz

Stabilizasyon durumları için ayak bileği ortezi

tek beden

Endikasyonlar:

- Ayak bileğinde bağ zedelenmelerinde (2. Ve 3. derece) konservatif ve post operatif koruma
- Burkulma sonrası
- Ayak bileği ekleminde kronik instabilite

Etki Şekli/Özellikler:

- Ürünün sert dış iskeleti pronasyon ve supinasyon hareketlerini stabilize eder.
- Baskıyı rahatlatmak için entegre köpük dolgu yastık



medi Walker Boot kidz

Sabit walker boot

ayakkabı
no

XS : 18-22
S : 23-25
M : 26-28
L : 29-32

Endikasyonlar:

- Post operatif tedavi (aşıl tendonu kopması, bağ, yumuşak doku ve tendon zedelenmesi, fibula kırıkları)
- Konservatif tedavi (ön/orta ayak ve ayak bileği, aşıl tendonu, fibula kırığı)

Etki Şekli/Özellikler:

- Bileği 90 derecede sabitleme
- Rocker taban doğal yürüyüşü destekler
- Basit yara gözetimi ve hijyeni



Elsa Ortopedi, "üründe kalite, hizmette kalite" temel ilkesine dayanarak 1998 yılında kurulmuştur. TPE tarafından marka tescilini almış ve ISO-13485 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

Kurulduğu yıldan günümüze kadar, ithalatını yaptığı ürün yelpazesini her geçen gün arttırarak sağlık sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir.

Dağıtımını yaptığımız fizik tedavi cihazları, ortopedik ürünler, varis çorapları ve sporcu sağlığı ürünleri, tüm dünyada kabul görmüş markalar olup, Türkiye pazarına firmamız tarafından sunulmaktadır.

Elsa Ortopedi; Ankara merkez ofis, Ankara şube ve İstanbul bölge müdürlüğü olmak üzere 3 merkezden yürütülmektedir. Merkezlerimiz dışında Türkiye geneline geniş bir bayi ağı ile hizmet verilmektedir.

Ankara merkez ofis ve İstanbul bölge müdürlüğü kapsamında, TSE-HYB belgesine sahip teknik servisi departmanları ile satışı yapılan cihazlar için, teknik servis hizmeti sunulmaktadır.



ELSA

Ortopedi, Rehabilitasyon, Spor Malzemeleri

Ankara Merkez:

Çaldıran Sokak No:14/A Kolej 06420
Tel: (0312) 434 27 94 - 434 42 94 - 434 11 67
Faks: (0312) 434 22 82 - 434 17 67

Ankara Şube:

Süleyman Sırrı Sokak No: 21/B Sıhhiye
Tel: (0312) 432 02 45 - 432 12 43 Faks: (0312) 432 42 87

İstanbul Şube:

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1603 Şişli
Tel: (0212) 320 88 81 (4 hat) Faks: (0212) 320 88 85

www.elsa.web.tr info@elsa.web.tr